



YUWEI DENTAL

材料性能与应用

MATERIAL PERFORMANCE & APPLICATION

SINCE 1968



全球齿科材料&技术服务商



上海予卫齿科材料有限公司

SHANGHAI YUWEI DENTAL MATERIALS CO.,LTD

电话/传真：0372-8326665

邮箱：marketing@yuweidental.com

网址：www.ayyuwei.com

地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路508号3幢2层A2241室



予卫齿科官方微信

公司简介

Introduction

予卫齿科始建于1968年，至今已有50余年的发展历史。公司集生产、研发、销售、服务于一体，为海内外客户提供专业的口腔材料与技术服务。公司每年投入巨资进行口腔材料&技术的创新与研发，迄今为止已申请多项发明专利，先后荣获省科技创新三等奖，市科技进步二等奖并被授予“消费者信得过单位”、“质量先进单位”等荣誉称号。予卫齿科旗下的合成树脂牙、弹性印模体材料、水门汀以及全口义齿制作工具深受海内外客户的青睐。在国内，公司每年不定期举办口腔技术培训会，积攒了成千上万的口腔从业者粉丝。越来越多的人开始信赖并使用予卫齿科的产品。在海外，予卫齿科通过了ISO13485、欧盟CE、美国FDA等质量体系认证，产品销售覆盖超100多个国家和地区。

“修合无人问，存心有天知”，公司将一如既往传承工匠精神，致力于成为一家国际化知名口腔材料与技术服务商，为人类的口腔健康事业贡献力量。

瞩目予卫，与您相约！

企业文化： 诚信 求实 创新 奉献

企业愿景： 成为国际化一流口腔材料和技术服务商



董事长：胡建民

企业发展大事记

2018 予卫齿科荣获CCTV上榜品牌，产品远销海外70多个国家和地区

2015 玻璃离子水门汀产品成功上市，同年新建25000平米现代化生产车间

2010 首次推出高端五层色树脂牙，填补了国内高端树脂牙生产空白

1990 新建超过8000平米生产基地，成为当时国内最大的树脂牙生产企业

1978 吸收欧美以及日本先进技术，自主研发两层显色树脂牙产品

2019 成立专业的全口义齿培训团队，迄今累计完成超过170多场全口义齿制作的技能培训

2017 硅橡胶印模材料成功上市，性能媲美国际知名品牌

2013 率先推出八大颌型系列牙齿，满足不同客户的产品需求

2003 推出四层色合成树脂牙，实现规模化生产和销售

1986 予卫齿科成为国内首批获得医疗器械生产资质企业

1968 予卫齿科成立，成为中国最早生产合成树脂牙的厂家之一

资质证书



CE



FDA



ISO13485



专利证书

边缘整塑蜡



- 【用途】主要用于确定全口义齿基托边缘的长度与宽度
- 【包装规格】9根/盒
- 【性能特点】
- 韧性高，不易断裂，与个别托盘粘牢固
 - 材料收缩率可达15%，可为后续的二次终印材料预留足够空间
 - 整塑后表面有褶皱粗糙度高，易跟后续的印模材料相结合
 - 操作简便，回切时不易碎裂

记忆蜡



- 【用途】制作无牙颌全口义齿时，准确获取正中颌位关系
- 【包装规格】5根/盒，长160 mm，宽12 mm
- 【性能特点】
- 常温下即可塑形，不受温度变化影响
 - 操作简便，患者咬合时受力平衡制取的颌位关系准确度高，与哥弓制取的颌关系吻合

梯形树脂蜡堤



- 【用途】用于全口义齿制作蜡堤
- 【包装规格】6片/盒
- 【性能特点】
- 操作简便，不粘刀，极大提升技工排牙效率
 - 无收缩，蜡型准确度高
 - 融化时材料体现蜡的性能，凝固时体现树脂的性能
- 【有效期】2年

边缘封闭蜡

- 【用途】用在上颌后堤区以及下颌舌系带两侧海绵体处的封闭
- 【包装规格】9根/盒
- 【性能特点】
- 弹性模量接近海绵体组织
 - 易操作，封闭精度高
 - 回切方便，不易碎裂



树脂蜡条

- 【用途】用于全口义齿制作时排牙时使用
- 【包装规格】27根/盒
- 【性能特点】
- 融化时材料体现蜡的性能，凝固时体现树脂的性能
 - 操作时无需融化成液体，可直接使用
 - 试戴时即可恢复简单的咀嚼功能



软蜡堤

- 【用途】制作半口义齿时取正中颌位关系
- 【包装规格】4片/盒
- 【性能特点】
- 常温下即可进行塑形，不受温度变化影响
 - 底面凹型设计，更容易固位
 - 操作简便，无需加热患者咬合后材料即可变软
- 【有效期】2年



颌位记录蜡



【用途】用于正中颌错位的检验与调整

【包装规格】16片/盒，长度15mm

【性能特点】

- 无需加热即可使用
- 操作方便简单

义齿基托树脂—免煮粉



【颜色】1F,2F,3F,4F,5F,6F

【规格】80g粉+40ml液/1Kg粉+500ml液

【技术参数】

粉液混合比例	1:0.43
混合时间	1-2分钟
面团期	5-6分钟
固化时间	60分钟
工作时间	8-10分钟

【性能特点】

- 无需加热煮沸，节约技工时间，提升操作效率
- 颜色稳定，收缩率小
- 韧性好，强度高，不易折断

义齿基托树脂—水晶粉

【规格】80g粉+40ml液/1Kg粉+500ml液

【性能特点】

强度高，透光度好，不易变形，是取代钢托的首选产品

【技术参数】

粉液混合比例	1:0.43
混合时间	1-2分钟
面团期	15-20分钟
固化时间	90分钟
工作时间	8-10分钟

义齿基托树脂—1R基托粉



【颜色】1F,2F,3F,4F,5F,6F

【规格】80g粉+40ml液/1Kg粉+500ml液

【技术参数】

粉液混合比例	1:0.43
混合时间	1-2分钟
面团期	15-20分钟
固化时间	90分钟
工作时间	8-10分钟

【性能特点】

- 强度高，透明度好，抛光后亮度高
- 分子量高达110万单位，材料具有较高的硬度
- 颜色稳定，不易被染色



软衬

【用途】用于全口义齿组织面衬垫

【规格】80克粉，40ml液

【性能特点】

- 属于自凝型系列，无需加热，操作简单使用方便
- 柔软度好，佩戴舒适
- 旧义齿修复时，理想的衬垫材料

【技术参数】

粉液混合比例	1:0.5
混合时间	1分钟
面团期	2-3分钟
固化时间	3个月
工作时间	2分钟



牙釉质粉

【用途】用于树脂材料类义齿制作时调整颌关系

【规格】80g粉+40ml液

【性能特点】

- 该产品是加法调颌的必选材料
- 硬度高，较好的耐磨度
- 半透明颜色，高逼真度，美学效果好

【技术参数】

粉液混合比例	1:0.45
混合时间	1分钟
面团期	3分钟
固化时间	4-7分钟
工作时间	2分钟



硬衬

【用途】主要用于旧义齿修复时衬垫

【规格】80g粉+40ml液

【性能特点】

- 属于免煮型，在压力条件下加热时无需煮沸，用开水冲泡即可
- 旧义齿修复时，理想的衬垫材料

【技术参数】

粉液混合比例	1:0.5
混合时间	1分钟
面团期	3-4分钟
固化时间	放入40℃-65℃以上 温水中，30分钟
工作时间	2分钟



义齿基托树脂—弹性粉

【颜色】3F, 4F, 5F, 6F 【规格】80g粉+40ml液/1Kg粉+500ml液

【性能特点】

- 韧性好，弹性度高。当基托受到外力时，它可以根据受力方向改变形态，外力解除后可恢复原状
- 具有较高的耐磨性，是不碎胶的升级产品

【技术参数】

粉液混合比例	1:0.43
混合时间	1-2分钟
面团期	15-20分钟
固化时间	90分钟
工作时间	8-10分钟



暂基托

【用途】全口义齿制作时，用于制作暂基托，可取代传统蜡托

【固化时间】6分钟

【规格】80g粉+40ml液/ 1kg 粉+500ml液

【性能特点】

- 不易变形，操作简单使用方便
- 精确度高，配合软衬材料可取代蜡托
- 配合软衬材料可用于倒凹较大的牙槽脊的暂基托的制作

【技术参数】

粉液混合比例	1:0.7
混合时间	1分钟
面团期	3分钟
固化时间	8-13分钟
工作时间	2分钟



粘结稀释液

【用途】用于稀释长久存放后状态变稠的粘接剂

【规格】5ml/瓶

【性能特点】

- 专利产品，稀释范围广泛
- 可节省粘接剂，节约成本



印模粘结蜡

【用途】用于各种硅橡胶印模材料、树脂材料、藻酸盐以及各种蜡的粘结

【包装规格】5ml/瓶

【性能特点】

- 粘结范围广
- 粘接强度高
- 操作简单使用方便



永久性软树脂



【用途】

- 1) 用于有残根的牙槽脊衬垫或骨突较大的牙槽脊填充倒凹
- 2) 针对背牙龈状况，用该材料来制作衬垫

【规格】50ml/罐

【性能特点】

- 没有固化期，不会硬化
- 针对有个别真牙残留并且松动的全口义齿制作时，该材料是最佳选择
- 弹性跟韧性高，有一定的柔软度，佩戴舒适
- 针对有个别真牙的无牙颌修复时，可取代卡环

半透明光固化树脂片



【用途】全口义齿制作时，用于制作个性化托盘

【规格】1.4mm, 25片/盒，

2.0mm, 16片/盒

【固化时间】90秒

【性能特点】

- 无异味，不黏手
- 半透明，更方便技工操作
- 固化后硬度高，不易变形

石膏蜡



【用途】由高温蜡石膏以及硅胶组成，代替部分石膏包埋组织面

【包装规格】225g/罐，2罐/盒

【性能特点】

- 有效避免石膏粘结在基托上，保证基托光亮度
- 无气泡，收缩率低
- 充胶开盒后，可直接进行抛光

蜡盘



- 【用途】用于冠桥体以及支架的铸造
 【颜色】绿色，蓝色
 【规格】直径98mm/95mm/89mm 厚度10mm-30mm

光亮蜡

- 【用途】提高表面亮度（用于基托，牙齿均可）
 【规格】10ml
 【有效期】3年
 【性能特点】
 ●用于涂抹基托表面更光亮，提高技工或医生的抛光效率
 ●涂抹牙齿，提高牙齿亮度，美观，保护牙齿



美学树脂

- 【用途】用于牙冠周围牙龈部分的美学修复
 【规格】不透明牙龈美学树脂：YZ12 糊状 4g/支
 不透明改性牙龈美学树脂：YC3 YC7 YC51 糊状 4g/支
 牙龈色美学树脂：Y22 Y23 Y24 固状 4g/支
 改性牙龈色美学树脂：YZ33 YZ34 YZ35 YZ36 糊状 4g/支
 半透明色牙龈美学树脂：Y20 固状 4g/支
 3D牙龈美学树脂粘结蜡：液状 5ml/瓶
 【有效期】3年（1℃-30℃避光储存）
 【性能特点】
 ●基于天然牙龈色调的设计色彩丰富，有多种牙龈色彩以及改性剂颜色能够模拟牙龈颜色的多种可能性，完美的色彩再现，满足高审美要求
 ●采用微填料型复合树脂材料质地不粘手，从而保证该材料具有优秀的机械强度，并且易于抛光。同时产品颜色稳定，使用寿命长久



树脂盘



- 【用途】用于临时冠和桥体的制作
 【色系】Vita 16色, BI, Pink, Clear
 【规格】单层色，多层色（98mm/95mm/89mm，厚度10mm-30mm）
 【性能特点】
 ●欧盟进口原材料，抗染色性能好
 ●挠曲强度大于100Mpa，良好的生物融合性
 ●经典16色

3D永久软衬硅橡胶套装



【技术参数】

技术参数	3D永久软衬硅橡胶	永久软衬粘结剂	软衬除异味剂
总操作时间【分钟】	1:45	/	2:00
建议口腔内时间【分钟】	6:00	/	/
凝固时间【分钟】	15:00	/	15:00
挥发时间【分钟】	/	1:00	/

3D人工牙龈硅橡胶



【工作时间】≥1分30秒

3D透明硅橡胶



【工作时间】 ≥ 1 分30秒

硅橡胶印模材料—流体



【用途】用于全口义齿以及固定类修复二次印模

【规格】50ml/支，2支/盒

【有效期】2年（室温下5-25℃储存）

【性能特点】

- 流动性超越轻体，精度高，尺寸稳定
- 属于无压力印模材料，轻体的升级产品

【技术参数】

工作时间	1'30"
口内固化时间	4'30"
抗拉强度	>2.0
抗裂强度	>3.0
弹性恢复率	>96.5%
邵氏硬度	48
尺寸稳定性	<0.5%

硅橡胶印模材料—超流体



【用途】用于全口义齿制取三次印模

【规格】50ml/支，2支/盒

【有效期】2年（室温下5-25℃储存）

【性能特点】

- 超高流动性，韧性高不易断裂
- 印模层细腻，复制率高
- 超薄印模层，厚度可达到10微米左右

【技术参数】

工作时间	1'30"
口内固化时间	4'30"
抗拉强度	>2.0
抗裂强度	>3.0
弹性恢复率	>96.5%
邵氏硬度	48
尺寸稳定性	<0.5%

硅橡胶印模材料—边缘整塑



【用途】主要用于确定全口义齿基托边缘的长度与宽度

【规格】50ml/支，2支/盒

【有效期】2年（室温下5-25℃储存）

【性能特点】

- 粘度高，操作时材料不易塌陷
- 硬度高不易变形，可一次完成整塑过程

【技术参数】

工作时间	1'30"
口内固化时间	4'30"
抗拉强度	>2.0
抗裂强度	>3.0
弹性恢复率	>99.5%
邵氏硬度	74
尺寸稳定性	<0.5%

硅橡胶印模材料—咬合记录



【用途】固定颌位关系，用于咬合记录

【规格】50ml/支，2支/盒

【有效期】2年（室温下5-25℃储存）

【性能特点】

- 固化时间快速，精度高
- 硬化后不易变形，易修整

【技术参数】

工作时间	40"
口内固化时间	50"
抗拉强度	>2.0
抗裂强度	>3.0
弹性恢复率	>99.5%
邵氏硬度	79
尺寸稳定性	<0.5%

硅橡胶印模材料—磨牙后垫



【用途】用于全口义齿制作时，封闭磨牙后垫部位

【规格】50ml/支，2支/盒

【有效期】2年（室温下5-25℃储存）

【性能特点】

- 弹性模量与磨牙后垫脂肪垫一致
- 操作简便，有滑动密封的功能，封闭精度高

【技术参数】

工作时间	1'30"
口内固化时间	4'30"
抗拉强度	>2.0
抗裂强度	>3.0
弹性恢复率	>96.5%
邵氏硬度	74
尺寸稳定性	<0.5%

硅橡胶印模材料—重体



【用途】用于修复体制作时制取初印模

【规格】350g基质+350g催化剂，2罐/盒

【有效期】2年（室温下5-27℃储存）

【性能特点】

- 独特配方设计，无异味，不易缩水较高的尺寸稳定性
- 印模清晰度高，较高的抗拉抗裂强度
- 硬度高，不易变形，存放时间长

【技术参数】

混合时间	30"
工作时间	2'
口内固化时间	2'30"
抗拉强度	>1.0
抗裂强度	>2.0
弹性恢复率	>99.5%
邵氏硬度	68
尺寸稳定性	<0.5%

印模蜡



【用途】制取初印模

【包装规格】厚度5mm，6片/盒

【性能特点】

- 可高温消毒，重复使用，不黏手
- 表面光滑度好，可取代红膏材料
- 印模精确度高，不易变形

托盘围模蜡



【用途】制作全口义齿时，用于制取印模边缘


【包装规格】3片/盒

【有效期】2年

【性能特点】

- 弹性模量接近黏膜组织，不会压迫软组织
- 使用简单方便，用手揉捏后材料即可变软
- 不易受温度变化影响，不黏手

高点测试剂

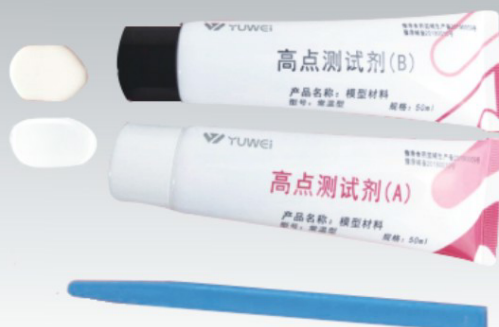

【用途】全口或局部义齿：粘膜面（组织面及黏膜转折处）

- 全冠：边缘、邻面、咬合面
- 铸造桩：桩贴合点
- 嵌体：边缘以及邻面
- 全口或局部义齿：粘膜面

3F粘丝



【用途】●种植粘结：它可以和种植基台的金属离子、修复体的锆离子发生离子交换反应生成钙、锆、金属离子螯合物

●金属带环，托槽与窝沟的粘结

【包装规格】液剂20ml，粉剂35g

【性能特点】

- 有吸放氟功能，释放出的氟离子能够杀死口腔内残留的细菌
- 调和后可拔出无数条丝，粘度极高，具有优秀的粘结性能

3F高强



【用途】

- 乳牙一、二类洞的直接修复
- 恒牙非功能区的一、二类洞修复
- 一、二类洞功能区修复中间或垫底层
- 四类龋洞的修复和牙根面的修复
- 桩冠的修复

【包装规格】液剂10ml，粉剂15g

【性能特点】

强度极高，具有吸氟放氟的功能，在做充填时可长期释放出氟离子，能有效杀死残留在牙本质小管内的细菌

3F II



【用途】

3F II系列适用于非咬合面的窝洞和颈部缺损的修复，同时也适用于固定桥和嵌体的固位

【包装规格】液剂10ml，粉剂15g

美佳固-亲水性聚羧酸锌水门汀




【用途】

用窝洞于垫底、衬垫和固定桥粘结

【包装规格】液剂33ml，粉剂60g

安捷美临时冠树脂

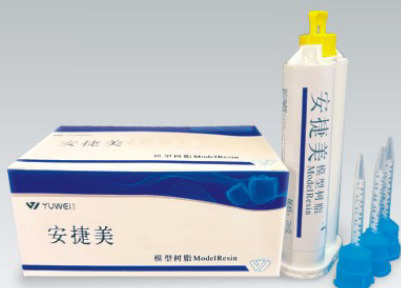

- 【包装规格】70克/混配枪筒装（6号混合头）
 【产品颜色】A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, B
 【用途】用于椅旁的个性化口内直接制作短期的临时冠桥修复体
 【性能特点】
 ●多单位的桥体 ●部分或全冠
 ●嵌体和高嵌体 ●前牙贴面

【技术参数】
 在室温23℃，水汽饱和度为50%的条件下，工作时间如下：

注入口内	0'
在口内凝固	30"
从口中取出	1'00
完全凝固	1'30"
完成修整	4'00

不同的室温会使凝固过程稍有不同。

光固化窝沟封闭剂





- 【适用人群】需要预防窝沟龋的群体最佳时间:乳磨牙3-4岁，第一恒磨牙6-7岁，第二恒磨牙11-13岁。
 【用途】用于预防龋齿，封闭牙齿窝沟点隙，阻断细菌进入。
 【性能特点】
 ●白色容易辨识和控制治疗效果
 ●良好的流动性能，润湿功能强
 ●极好的边缘密封性，可以很好的粘附于牙釉质
 ●持续的释放氟离子，加强预防效果
 ●材料经济，抗磨损，长期临床效果显著

牙釉质粘合树脂



- 【包装规格】光固化糊剂：3.5g×1支 液体：3ml×1瓶
 酸蚀剂：2.5ml×1支
 【型号】光固化型(温变型)
 【用途】产品用于正畸托槽的粘接，仅接触牙釉质。
 【性能特点】
 ●致优的粘接强度，使陶瓷和金属托槽粘接更稳
 ●富含独特的活性因子，具有很好的修复功能固
 ●双倍的工作时间比其他光固化粘结剂可以更从容的定位，改进的专利配方提供比同类粘结剂多出20%的渗透加速度，有效的降低了托槽的脱落率。
 ●含氟离子，能有效预防正畸过程中发生龋坏
 ●智能温变，25度绿色，35度无色，方便识别

半可调颌架

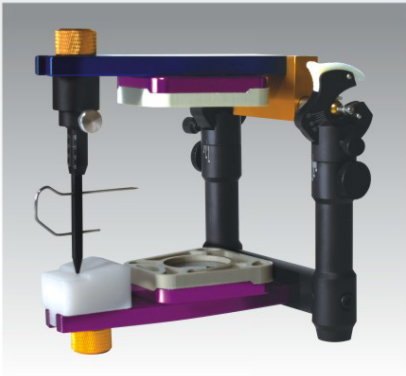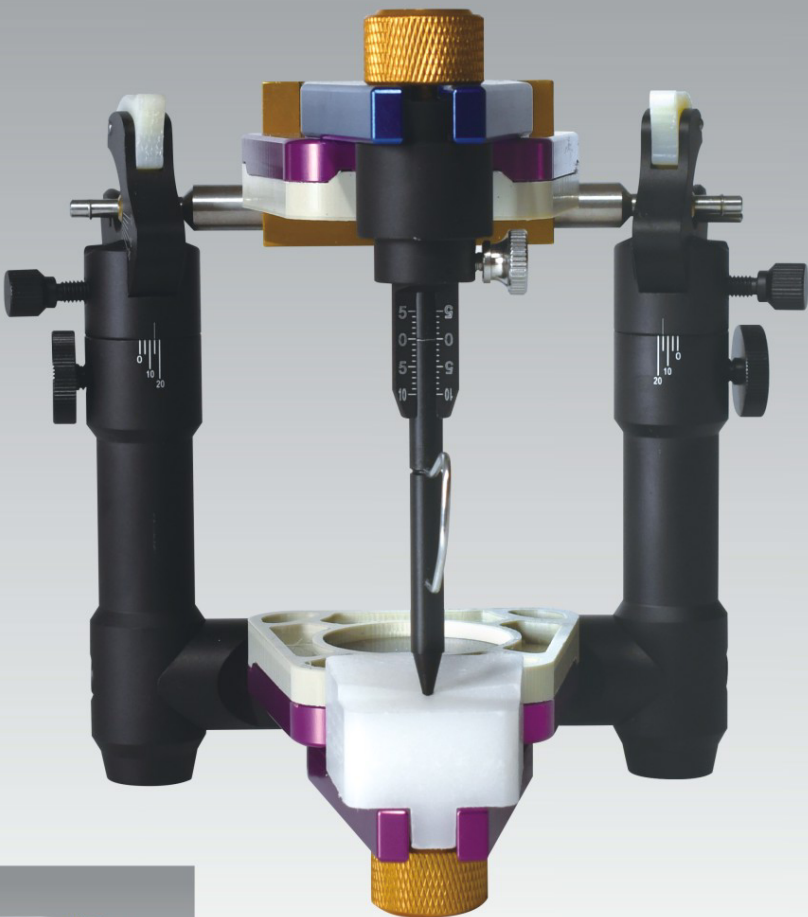

用途：制作全口义齿时，排牙使用
技术参数：

髁球中心距离	11.28cm
前身髁导斜度范围	15-60°
侧方髁导斜度调节范围	0-20°
前伸髁导运动方式	弧线运动
鲍威尔三角	等边三角形
切到盘度数值	15/35°
模型更换方式	磁性吸附

【材质】钴铬合金

【性能特点】

- 采用精雕设备雕刻而成，精度高
- 相比传统颌架能够更好模拟啮合关节运动
- 配套专用面弓使用，可精准确定切牙乳突到髁突的半径

面弓+转移台



【用途】确定颅骨角度，转移颌关系，配合专用颌架可精确定切牙乳突到髁突的半径

【材质】合金铝/钴铬合金

【性能特点】

- 通过转移台可精确转移颌关系数据
- 操作简便

手动注塑机




【用途】用于全口义齿制作注塑使用

【性能特点】

- 体积小，操作简便
- 保证义齿无飞边，减少调颌，提高义齿准确度

带刻度颌平面板

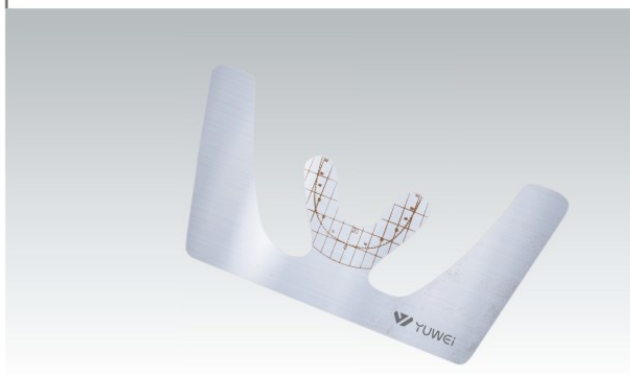

【材质】铝合金

【用途】用于调整上颌蜡堤平衡度


颌平面板



【材质】铝合金

【用途】用于调整上颌蜡堤平衡度


注塑煮牙盒

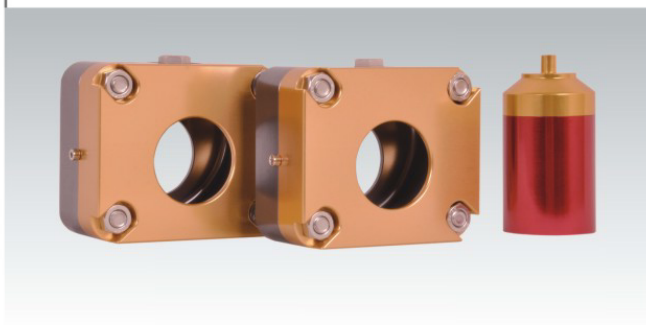

【材质】硬质铝合金

【尺寸】12cmx10cmx6cm

围模托盘

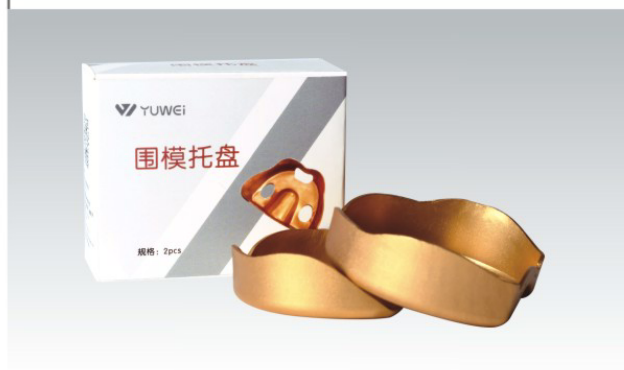

【用途】制作标准模型


【规格】1, 2, 3, 4, 5, 6号, 2个/盒

【材质】铝合金

【性能特点】


- 不易粘结材料
- 表面硬化处理层，不易氧化生锈，经久耐用

根管锉垂直加压器

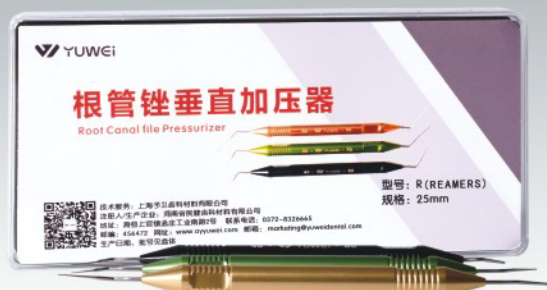

【用途】用于根管充填时修复塑型。加压器前端有刻度，方便测量根管深度，有记忆功能，放入热水，即可回弹变直。

橡皮障套装工具

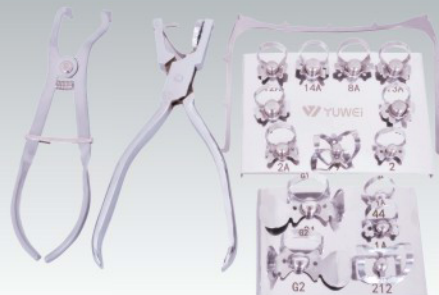

【规格组成】橡皮障打孔器1把，橡皮障夹钳1把，橡皮障支架1个，橡皮障夹14个

蒸汽冲蜡机



【用途】用于开盒后清除型腔内的蜡堤

垂直距离测量尺



【用途】用于全口义齿制作时测量患者垂直咬颌距离

种植工具套装



【用途】
用于种植牙手术时测量与定位

自动注塑机



【用途】用于全口义齿制作注塑使用
【性能特点】

- 操作简便，提高注塑效率
- 保证义齿无飞边，减少调颌，提高义齿准确度

压力锅

- 【材质】不锈钢
【压力】0.1-0.6Mpa
【功率】1500W
【性能特点】
●容器有良好的致密性，压力恒定
●操作简便



自动升压聚合器

- 【用途】用于旧义齿修复时，树脂材料的聚合增压




蜡堤软化器

- 【用途】用于各种蜡制品的软化
【功率】100W
【尺寸】209x242x168mm
【性能特点】
●可保持恒温控制，使树脂蜡堤软化均匀
●温度可调节



哥特式弓

- 【用途】全口义齿制作时，获取正中颌位关系
【性能特点】
●制取颌位关系精准度高
●不锈钢材质，经久耐用

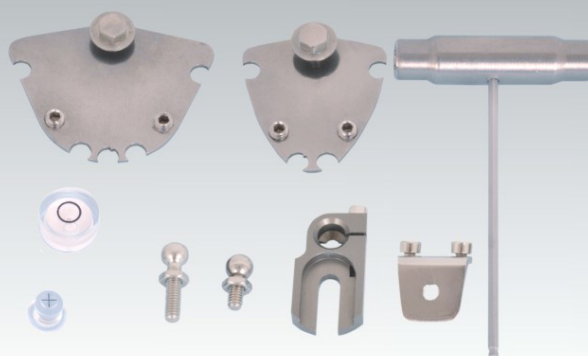

咬颌中心测量尺

- 【用途】测量咬颌接触点的位置



排牙尺

- 【材质】不锈钢
【用途】排舌侧集中颌、夹侧集中颌的专用工具



软铝托盘



【包装规格】大中小三号，厚度5mm，2片/盒

【性能特点】

- 软铝材质，不会给粘膜反折造成压力
- 双层设计，容易修剪调整，制取无压力印模的首选
- 可根据牙槽脊形态进行拗制

前庭沟尺



【用途】确认基托边缘粘膜转折3mm的位置

黄金铲



【用途】制作蜡堤时使用

【材质】不锈钢

【性能特点】

- 材质较厚，储存热量大，储热时间长
- 操作方便

漏牙托盘



【包装规格】大中小三号，厚度5mm，2片/盒

【性能特点】

- 双层设计，漏牙空隙间距可调节，
- 方便灵活可根据牙槽脊形态进行拗制

颌型测量尺



【用途】用于确认适合的颌型

正中托盘



【用途】制取初印正中颌位关系

【性能特点】操作简单，准确率高

全口塞尺



【用途】主要用于排牙时，准确测量前牙覆盖之间以及后牙非接触点之间的距离

【规格】0.2mm-2.0mm

光固化机



- 【用途】用于个别托盘制作时，固化托盘材料
 【功率】80W
 【尺寸】290*185*120mm
 【性能特点】
 ●光照穿透度高，固化速度快
 ●外观设计精巧

万向排牙底座



- 【用途】配套予卫颌架排牙使用
 【性能特点】
 ●中间附有磁石，更适用于对咬合的调整和设置

颌位记录仪



- 【用途】检验颞下颌关节活动量，记录颞下颌关节的运动轨迹

10微米咬颌条



- 【用途】用于精准调整种植咬合关系和种植体就位的临间隙
 【材质】不锈钢

磁铁多功能底座



- 【用途】安装哥特式弓，配合全口专用颌架快速准确制作蜡堤
 【性能特点】
 ●用它制作的蜡堤上下咬颌精准，不错位垂直距离准确，快速省时提高工作效率，是临床医生的好帮手

雕刻刀



- 【用途】托盘定位的回切和边缘整塑后硅橡胶的回切

排牙导板




- 【用途】全口义齿制作时排牙使用
【度数】100° 125° 140° 160°
【材质】合金铝

面部测量尺



- 【用途】确认患者面部轮廓以及上颌前牙的尺寸大小

抛光工具套装

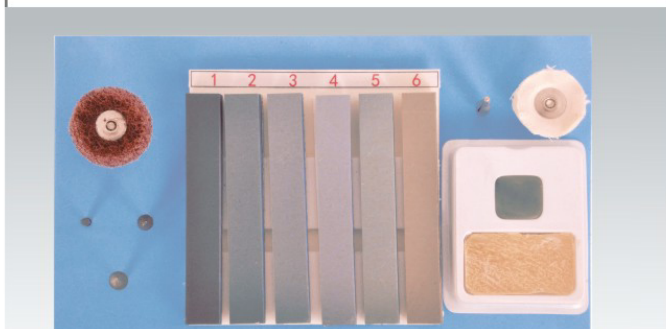

- 【用途】用于全口义齿精细抛光

气铲




- 【用途】用于开盒后义齿表面的石膏清理
【气压】0.6~0.8Mpa
【性能特点】
●振动频率高
●可实现快速清理，提升技工工作效率

豆瓣成型片



- 【用途】辅助修补II、III、IV类洞，恢复牙齿形态
【规格】35 μ m 50 μ m 100片/盒 50片/盒
【性能特点】
●厚度比较薄
●修复后洞型美观

全自动成型片夹

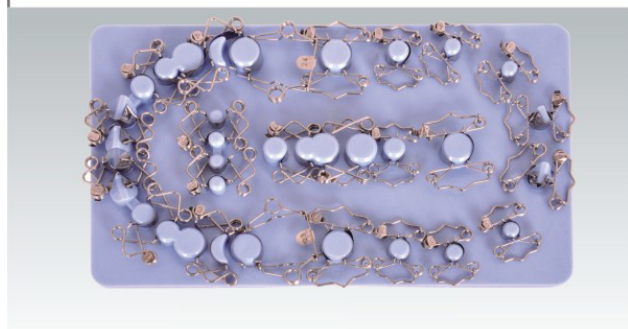


- 【用途】辅助修补II、IV、V类洞，恢复牙齿形态
【规格】标准型/特殊型
【性能特点】
●不锈钢弹簧材质，耐用性好



八大颌型设计满足不同牙槽脊形态需求

独特多元的颌型设计，减少了调颌时间甚至可以不用调颌。极大的提升了医生的工作效率，减少了患者复诊次数。



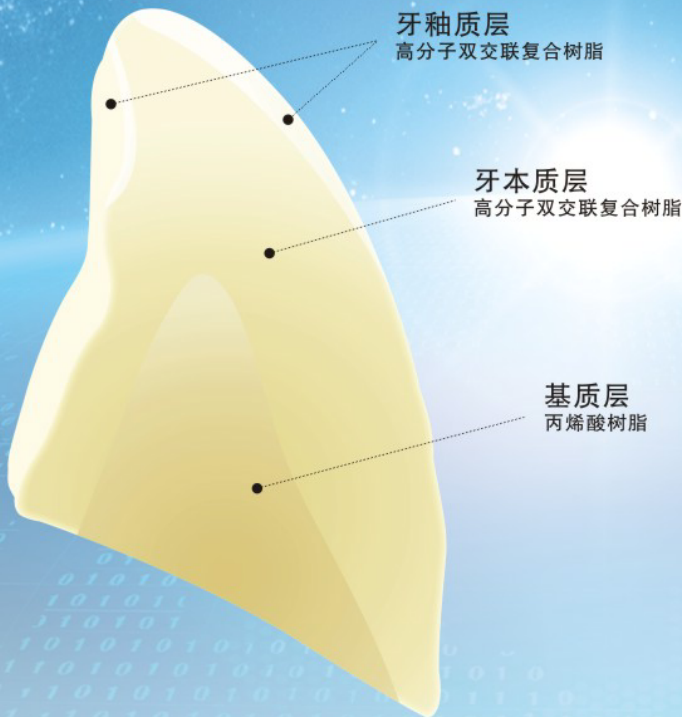


模仿天然牙形态进行个性化设计 更适合东方人的牙体形态

- 突出与天然牙完全相同的表面纹理、边缘峭突起以及切角特征
- 表面结构进行个性化且仿生设计，相邻牙齿切缘角度变化的协调性
- 切缘增宽，可使牙齿完美覆盖义齿
- 牙颈部增宽
 - 1) 确保比例匀称、平分颌间隙设计的最佳选择
 - 2) 出色覆盖牙颈部下附着体结构
 - 3) 极好的适应口内卫生要求，确保义齿良好的闭合性


采用超微填料加强型聚合树脂

该材料是运用特殊工艺将无机微填料颗粒和PMMA珍珠聚合并嵌入到PMMA聚合物基质的网状结构中而制成，结果使得高度交联的复合材料有着杰出的耐磨性和材料强度。

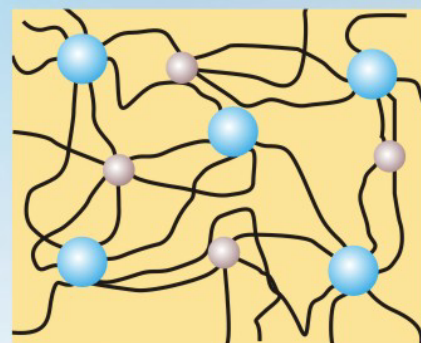


- PMMA珍珠，溶于单体且合并入聚合网状结构
- └ 交联单体
- 无机微填料，合并于聚合网状结构

长期有效的高耐磨性

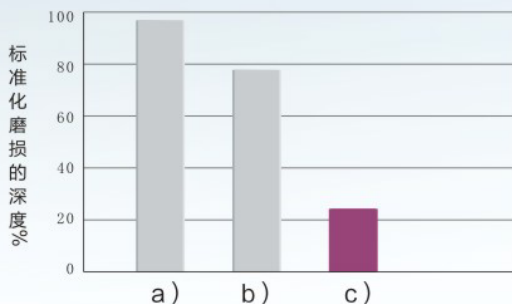

- a) 交联材料-聚甲基丙烯酸甲酯
b) 高交联材料-聚甲基丙烯酸甲酯
c) 予卫微纳米复合填料

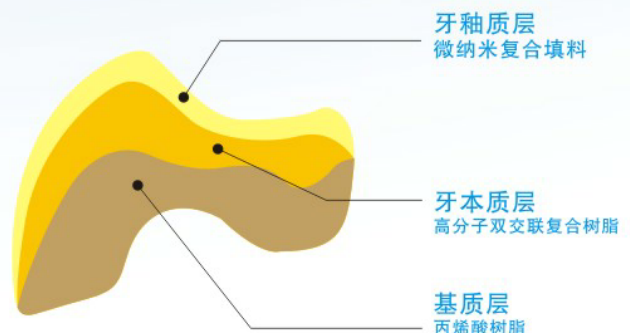

予卫5系列



形态	上前牙 T1 T3 T4 T5 T6 T9 T11 T8 T10 S2 S3 S4 O5 下前牙 L1 L2 L5 L6 L7 L8 L10 L11 L14 后牙 30 32 34 36
材质	纳米微填料复合树脂
颜色	VITA 16色
角度	30°
层色	2层色
规格	6x1 8x1 28x1

予卫黑钻系列




形态	上前牙 SS3 SS4 SS5 HC3 HC4 HC5 HT3 HT4 HT5 下前牙 SS3 SS4 SS5 HC3 HC4 HC5 HT3 HT4 HT5 后牙 S28 S30 S32
材质	纳米微填料复合树脂
颜色	VITA 16色
角度	30°
层色	2层色
规格	6x1 8x1 28x1

予卫3D系列




形态	上前牙 T42 T43 T47 T50 O40 O43 O48 R43 R45 R47 S49 S47 下前牙 L33 L34 L37 L40 后牙 30 31 33
材质	纳米微填料复合树脂
颜色	VITA 16色
角度	上30° 下20°
层色	3层色
规格	6x1 8x1 28x1

予卫免调颌系列

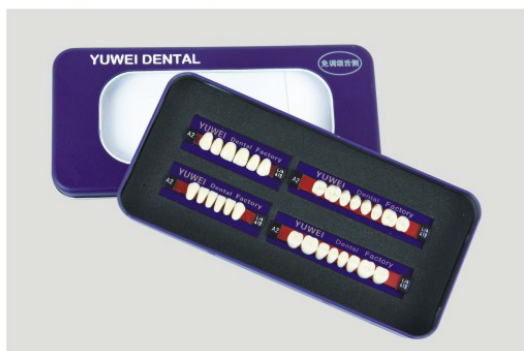

形态	上前牙 385 390 419 425 438 下前牙 385 390 419 425 438 后牙 28 30 32 34
材质	纳米微填料复合树脂
颜色	VITA 16色
角度	上30° 下5°
层色	3层色
规格	6x1 8x1 28x1

予卫5 前牙形态图
上颌 T型尖圆型

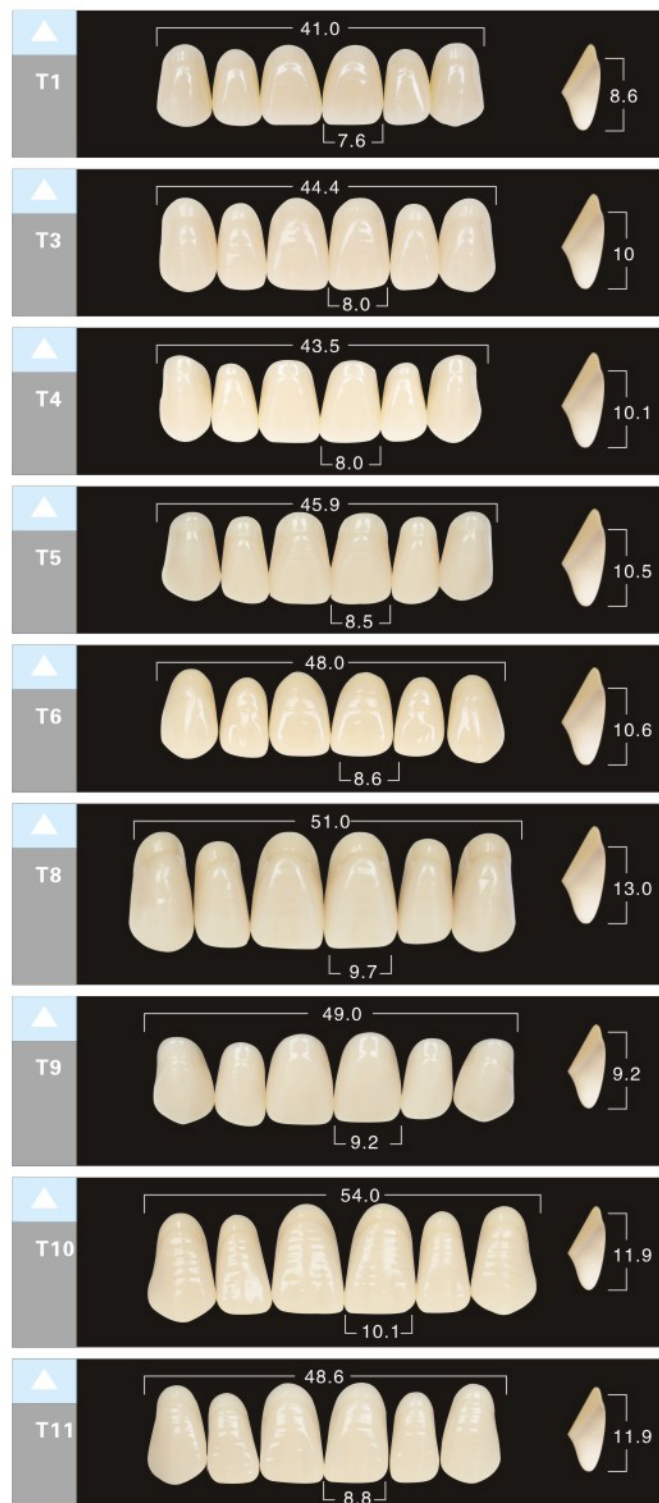


予卫5 前牙形态图
上颌 O型卵圆型




予卫5 前牙形态图
上颌 S型方型





予卫5 前牙形态图
下颌 L

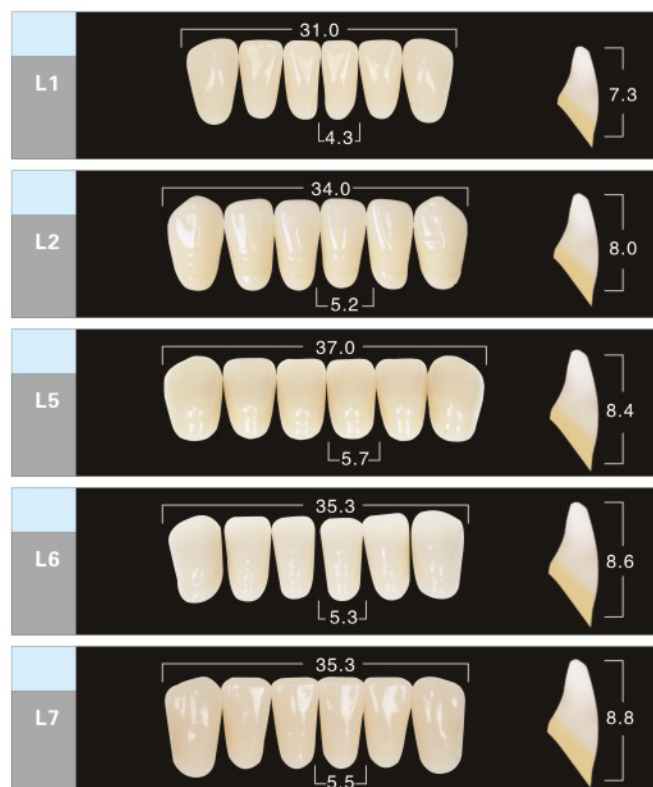

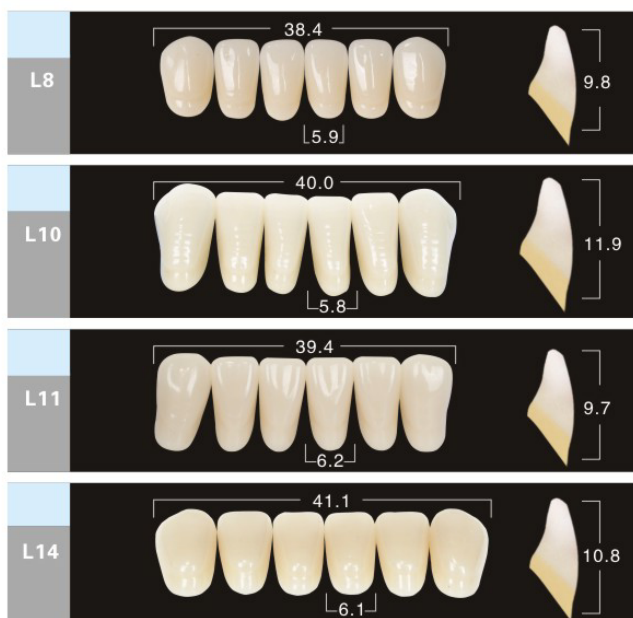


予卫5后牙形态图

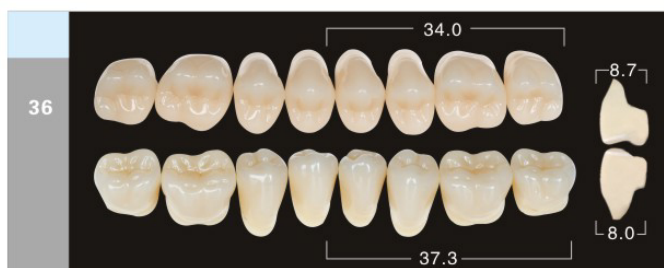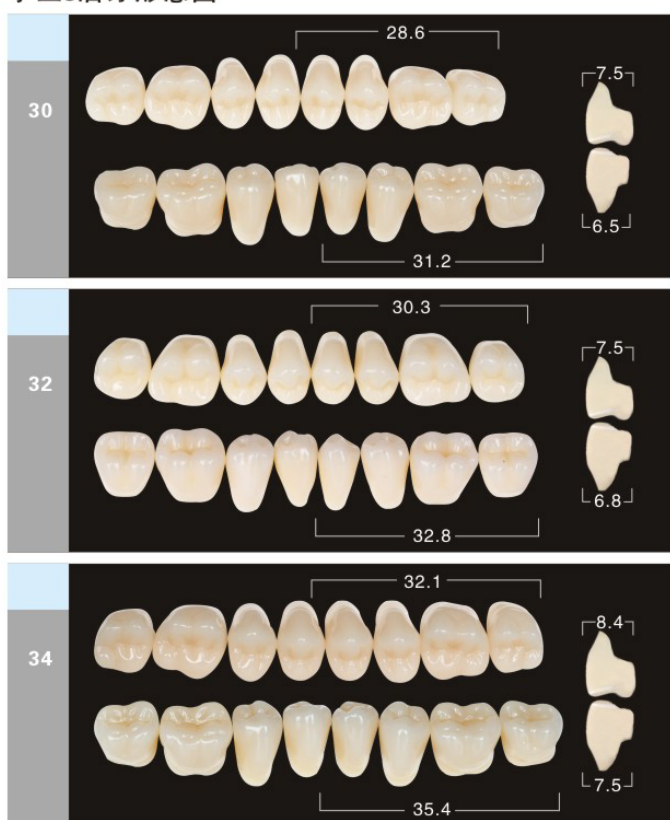


予卫5系列 牙形匹配表

上前牙	下前牙	后牙
T1	L1	30
T3	L6	32
T4	L6	32
T5	L7	32
T6	L7	32
T9	L11	32
T11	L11	34
T8	L14	34
T10	L10	36
S2	L2	30
S3	L5	30
S4	L7	32
O5	L8	34

予卫5系列包装规格

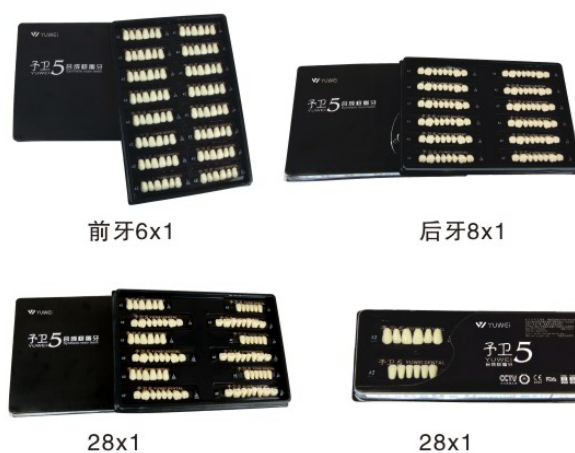


予卫黑钻 前牙形态图
SS 短方型

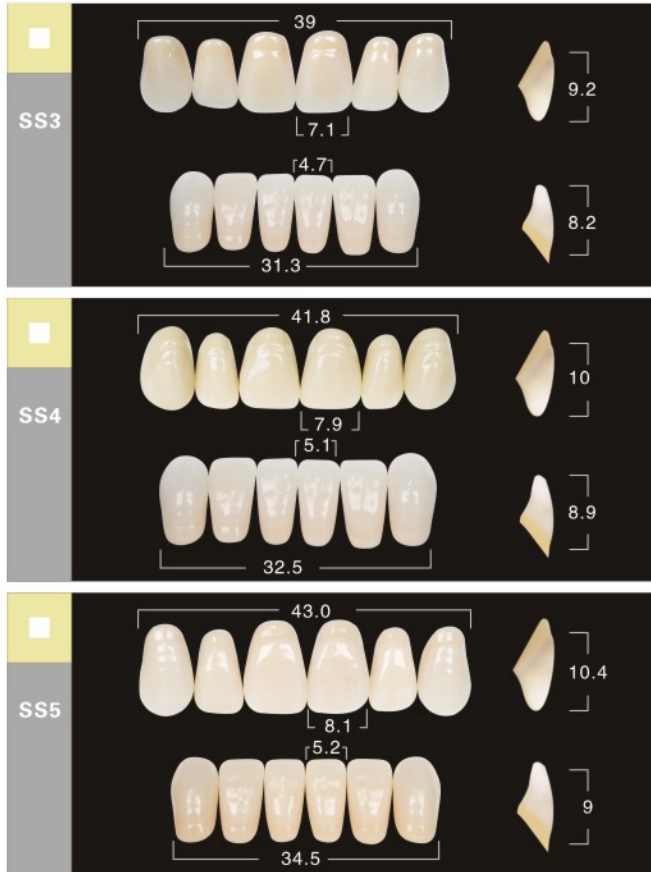

予卫黑钻 前牙形态图
HT 尖型



予卫黑钻 前牙形态图
HC 混合型

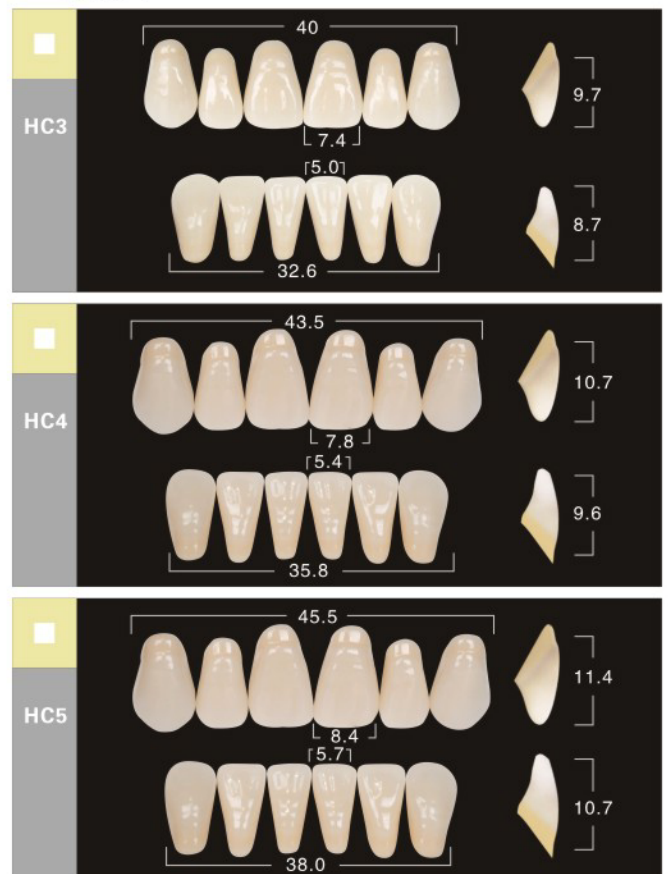

予卫黑钻 后牙形态图



予卫黑钻系列 牙形匹配表

上前牙	下前牙	后牙
SS3	SS3	S28
SS4	SS4	S30
SS5	SS5	S32
HC3	HC3	S28
HC4	HC4	S30
HC5	HC5	S32
HT3	HT3	S28
HT4	HT4	S30
HT5	HT5	S32

予卫黑钻包装规格




散牙



予卫3D 前牙形态图
上颌 T 尖型




予卫3D 前牙形态图
上颌 O 卵圆型

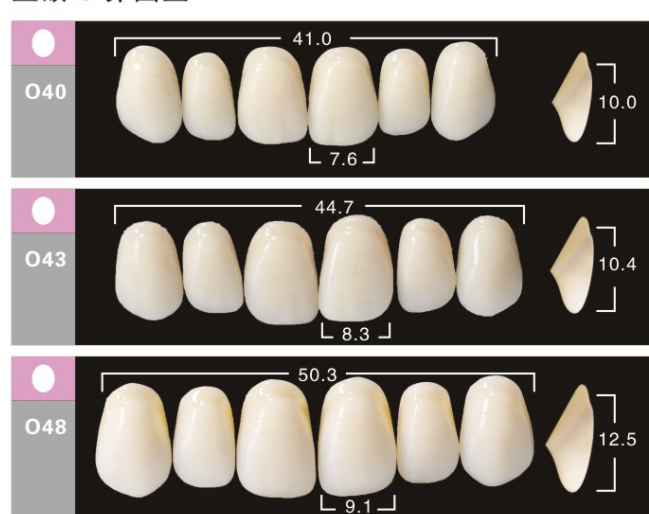

予卫3D 前牙形态图
上颌 S 方型



予卫3D 前牙形态图
上颌 R 方圆型

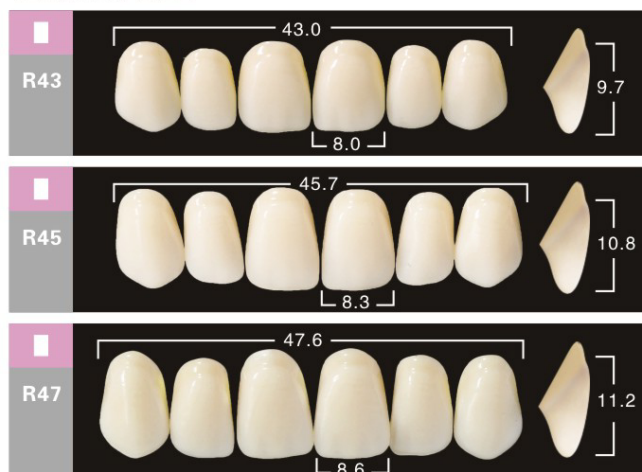


予卫3D 前牙形态图
下颌 L



予卫3D 后牙形态图




予卫3D系列包装规格

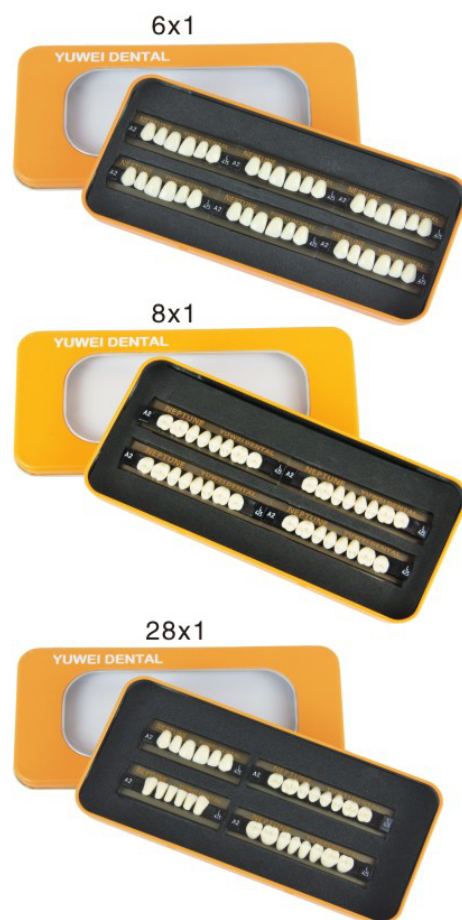

予卫3D系列 牙形匹配表


上前牙	后前牙	后牙
T42	L33	30
T43	L37	31
T47	L37	31
T50	L40	33
O40	L33	30
O43	L34	31
O48	L40	33
R43	L34	30
R45	L37	31
R47	L37	33
S49	L 40	33
S47	L37	33

予卫免调颌 上前牙形态图
上颌

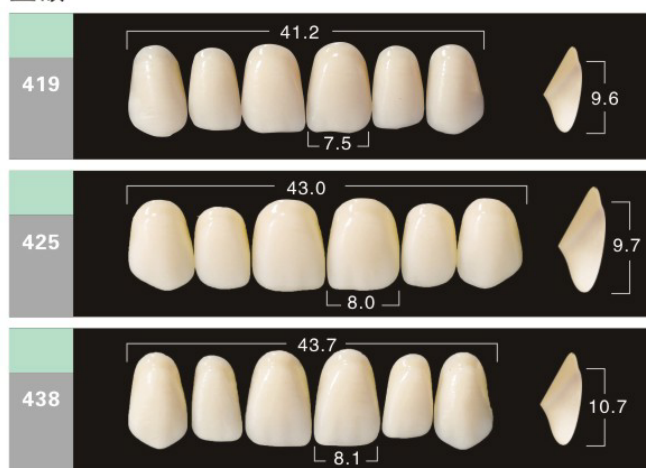


予卫免调颌 下前牙形态图
下颌




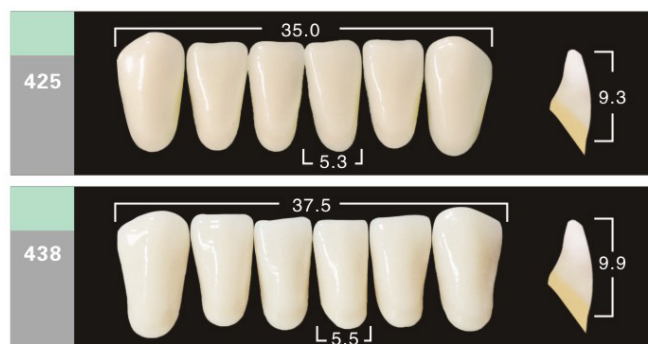

予卫免调颌 后牙形态图
舌侧集中颌

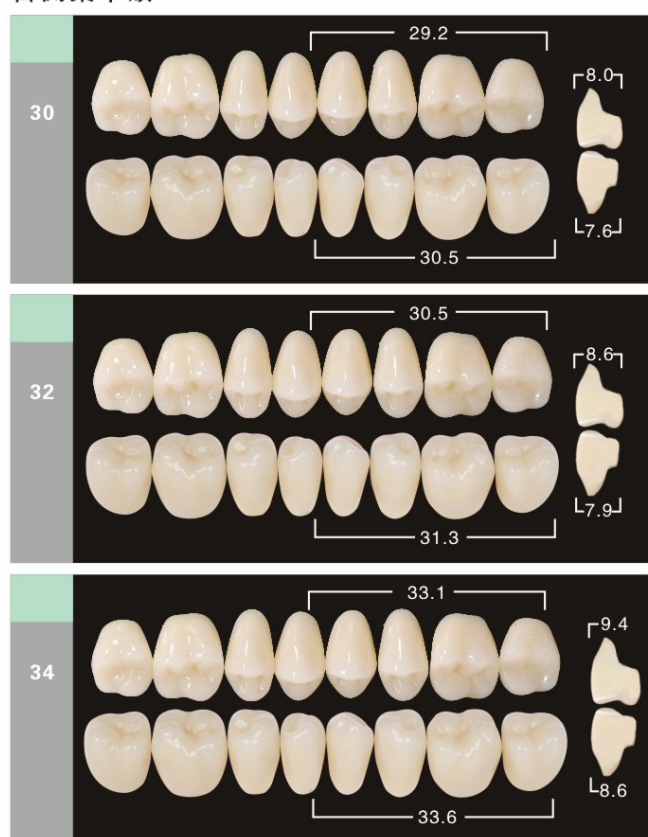


予卫免调颌 上前牙形态图
上颌R方圆型

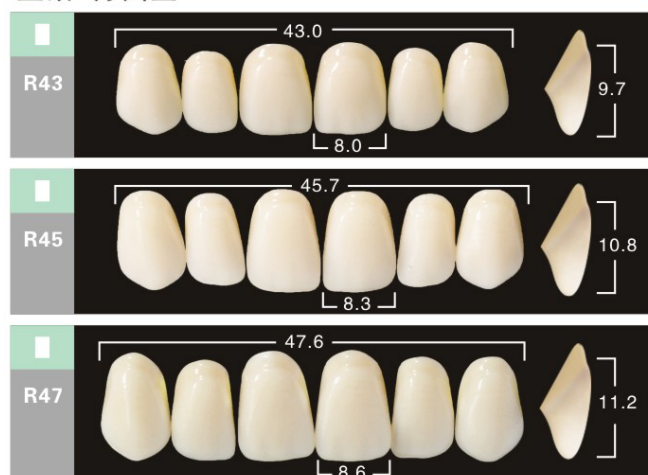


予卫免调颌 下前牙形态图
上颌



颊侧集中颌



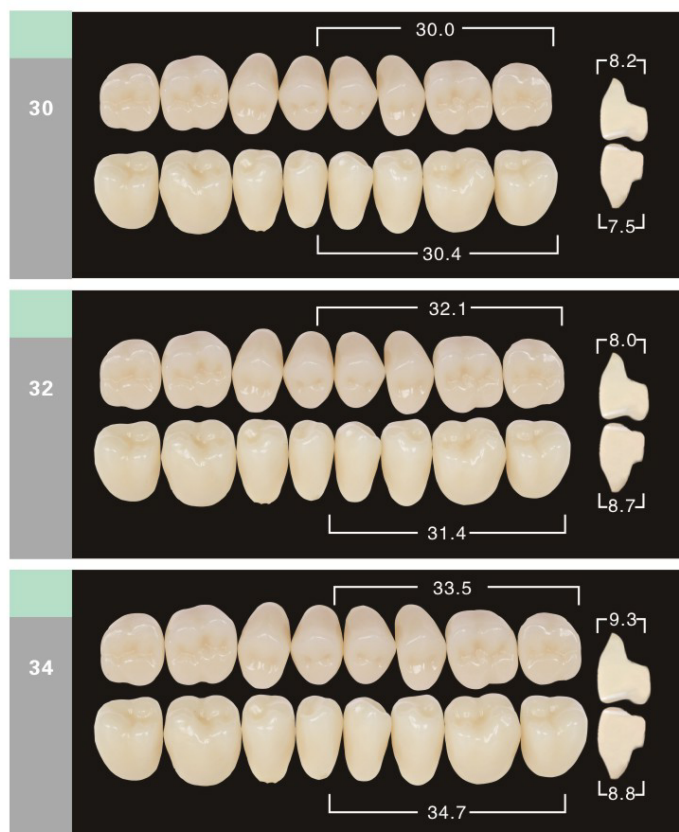


舌侧集中颌反颌

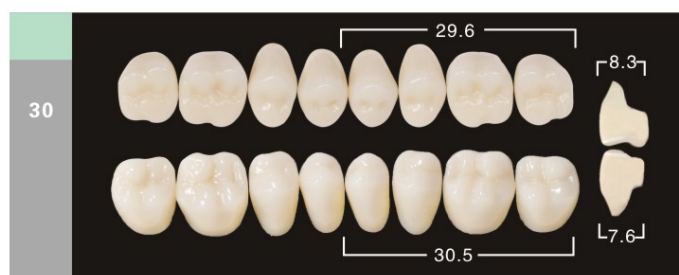



颊侧集中颌反颌

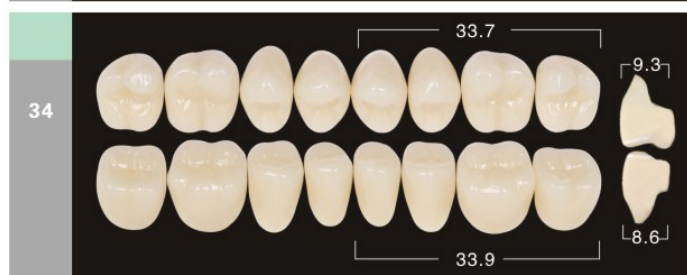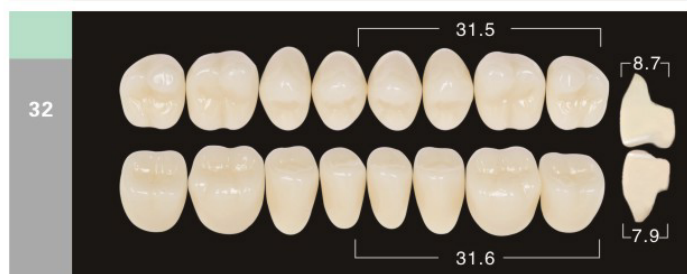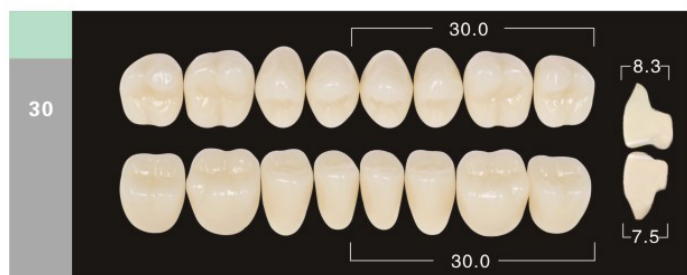

予卫免调颌系列 牙形匹配表

上前牙	下前牙	后牙
419	419	30
425	425	32
438	438	34
R43	L34	30
R45	L37	32
R47	L37	34

免调颌系列包装规格

6x1



8x1



28x1



牙齿整理盒

(380mmx175mmx210mm)



散牙整理盒

(295mmx200mmx130mm)



予卫树脂牙比色板

(VITA16色)

